

Inhaltsverzeichnis Zertifikate / Prüfberichte
Ordner EMIX Trading AG, Stand 01.02.2022

4.1	Angtai KN95
4.2	Chemipharma
4.3	Gaidien 3 Ply
4.4	Guanhua KN95
4.5	Naisian KN95
4.6	Pinyue KN95
4.7	SWORD 3 PLY
4.8	Teyin FFP2
4.9	YI Cheng KN95
4.10	Yeufon 3 Ply
4.11	Yeufon KN95



160010110776



(2016)国认监认字(138)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L145

检 验 报 告

报告编号: WH0292-2018

产品名称 特种劳动防护用品

单元名称 /

企业标称 折叠口罩

受检单位 广州市冠桦劳保用品有限公司

检验类别 委托检验

报告日期 2018 年 5 月 14 日




国家劳动保护用品质量监督检验中心 (武汉)

国家劳动保护用品质量监督检验中心（武汉）

检验报告

编号: WH0292-2018

共 2 页 第 1 页

产品名称	特种劳动防护用品	规格型号	8861 KN95
委托单位名称	广州市冠桦劳保用品有限公司	委托单位联系地址	广州市增城区新塘镇 太平洋工业区 7 路 113 号
联系人	赵桃英	电 话	18026313891
生产厂家	广州市冠桦劳保用品有限公司	商 标	冠桦
产品批号 / 生产日期	2018 年 4 月 29 日	样品数量	15 个
样品描述	完好	到样日期	2018 年 5 月 2 日
检验依据	GB 2626—2006《呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》		
检验项目	过滤效率		
检验日期	2018 年 5 月 2 日至 2018 年 5 月 9 日		
检验结论	<p>按照 GB 2626—2006《呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》对该样品进行检验，过滤效率符合该标准规定的（KN95）要求。</p> <div style="text-align: right;">  <p>检验单位 签发日期: 2018 年 5 月 14 日 检验专用章</p> </div>		
备 注	/		
批准:	审核: 11-11 宋	主检: 刘	

自吸过滤式防颗粒物呼吸器(部分项)检验结果汇总

编号: WH0292-2018

共 2 页 第 2 页

序号	检验项目	标准要求	实测结果	本项结论	备注
1	过滤效率	KN90 \geq 90.0% KN95 \geq 95.0% KN100 \geq 99.97%	最低值: 97.1%	合格	/
		KP90 \geq 90.0% KP95 \geq 95.0% KP100 \geq 99.97%	最低值: /		
		NaCl颗粒物检测 温度: (25 \pm 5)℃ 湿度: (30 \pm 10) %	实测温度: 21.1℃-24.7℃ 实测湿度: 31.2%-35.1%		
		油性颗粒物检测 温度: (25 \pm 5)℃	实测温度: /		

检验起止日期: 2018 年 5 月 2 日至 2018 年 5 月 9 日


1.品牌冠桦牌




冠桦集团

GUAN HUA GROUP

2. 口罩图片

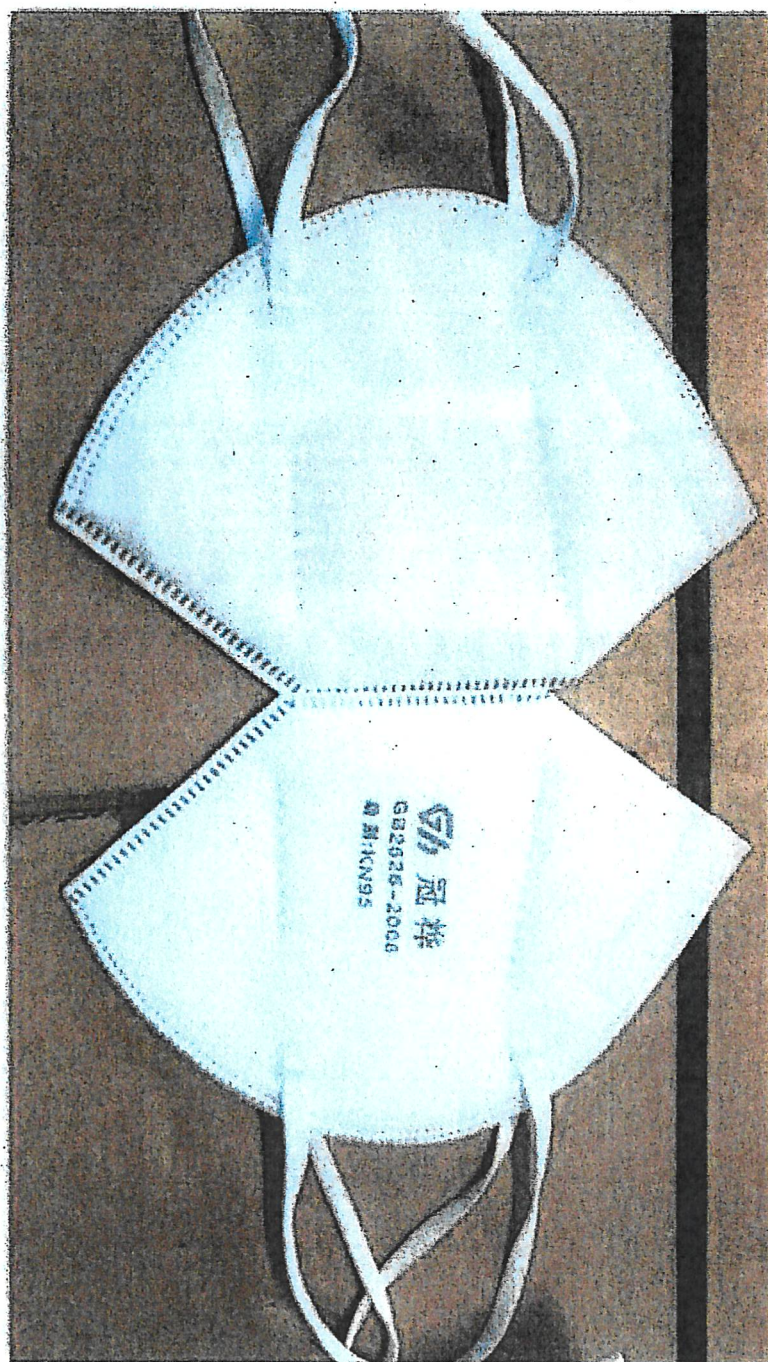

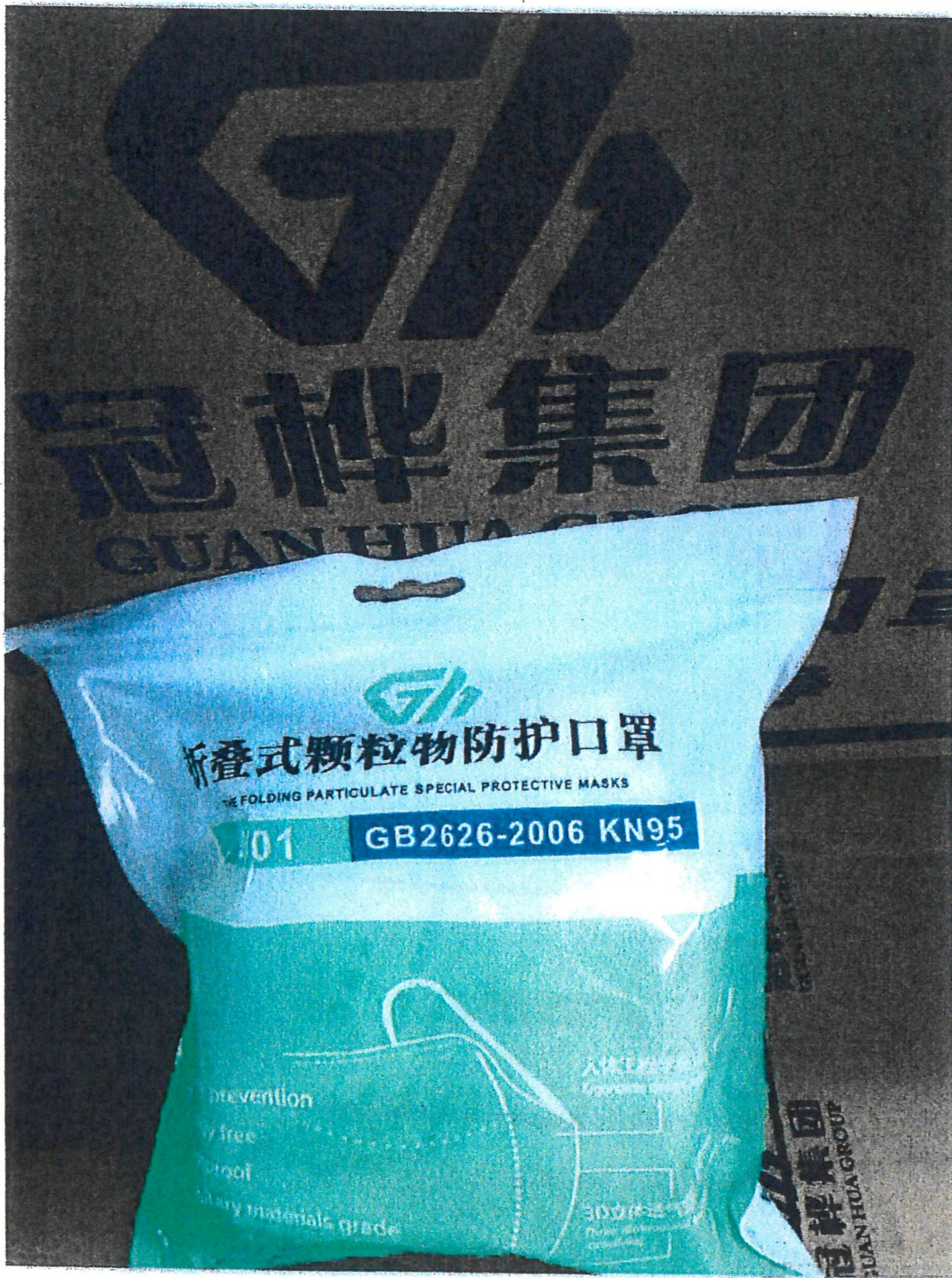

冠桦集團

佩戴方法和佩戴气密性检查方法



将两端的耳带挂于双耳，使其于鼻端贴合，保证密封。

...其于厚薄贴合，保证密封。

检查口盖与腔部的密合性。

空气从鼻尖处溢出，则按步骤2重新调整鼻夹；如空气从耳旁溢出，则调整耳带；如不能得到很好的配合，则反复调整，直至不漏气为止，则可进入工作区域工作。

...出，则可进入工作区域工作，

质量较低，不建议使用。

生干淨，避免用手接觸口罩內側。

应立即做“紧密性”检查。

系密性、恒重，
流通、呼吸不畅的密闭场所、缺氧环境或睡眠中佩戴。

完好无损，如发现口罩有污染或破损等请勿使用。

不可用微波炉消毒。

性用品，請勿重複使用。

有效期

贮存温度在-20℃至+30℃, 相对湿度不高于80%的条件下, 有效期为生产之日起24个月。

对某些反应物的防护，使用者必须经过培训，遵守正确使用方法使用本产品，不正确的使用会导致疾病甚至死亡。正确的使用

3. 口罩检测报告



检验检测报告



No: 200051410

防伪查询网址: www.gttc.net.cn

防伪码: BURI-1560-43

共3页 第1页

二维码



委托单位	广州市冠格劳保用品有限公司 地址: 广州市增城区新塘镇仙娥岭宏泰工业区(厂房A) 2-3楼		
样品信息	折叠式颗粒物防护口罩 50个 批号款号: 2020032401 颜色: 白色 材质: 无纺布 号型规格: 9801 生产单位: 广州市冠格劳保用品有限公司		
检验性质	委托检验	样品受理/测试开始日期	2020-03-26
		报告签发日期	2020-04-03
判定依据	GB 2626-2006 《呼吸防护用品: 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》		
综合检验结论			
检验检测结果	检验检测项目	判定依据	判定
	NaCl 颗粒物过滤效率	GB 2626-2006	符合
	吸气阻力	GB 2626-2006	符合
	呼气阻力	GB 2626-2006	符合
备注	本报告中检验检测项目均在相应标准规定的环境条件下进行(有注明除外) 复印件、副本未重新加盖报告书确认章无效。 本报告检验检测地址为广州市番禺区珠江路1号。		



签发: 刘圆 工程师

刘圆

总部: 广州市番禺区珠江路1号
花都实验室: 广州市花都区新街镇南平路1号

电话: 020-61094536/61594159
电话: 020-27721161




扫描全能王 创建

样品图片

No: 200051410

共3页 第2页

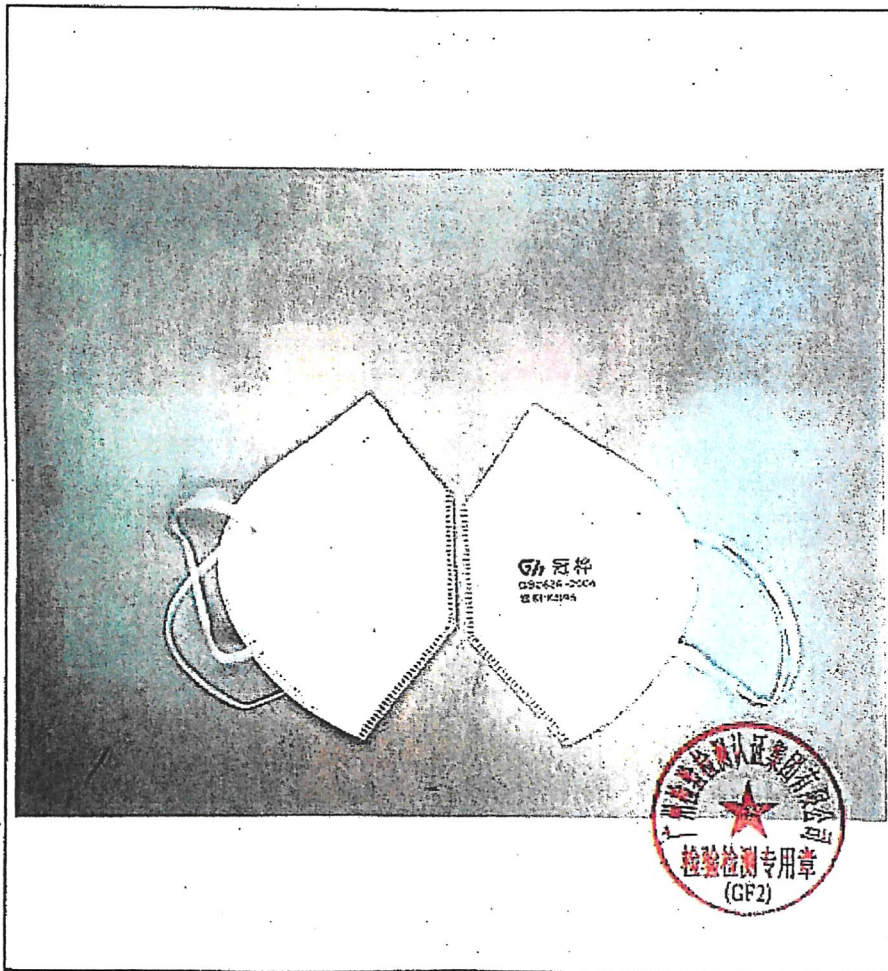



检验检测报告附页

No:200051410

共3页 第3页

检验检测项目 (计量单位) (样品识别)	测试方法	标准值及允差	检验检测结果	判定	备注
●NaCl颗粒物过滤效率	GB 2626-2006 6.3 空气流量:85L/min 气溶胶颗粒:NaCl 气溶胶浓度:15mg/m ³ 温度:23.0℃ 相对湿度:36.2%	过滤效率(%): ≥95.0 (KN95)	过滤效率(%): 未处理样品: 1# 99.562 2# 99.451 3# 99.577 4# 99.560 5# 99.870 6# 99.710 7# 99.465 8# 99.682 9# 99.542 10# 99.389 温湿度预处理后样品: 1# 99.410 2# 99.343 3# 99.512 4# 99.341 5# 99.320	符合	
●吸气阻力(Pa)	GB 2626-2006 6.5 头模:中号	≤350	未处理样品: 1# 185.6 2# 107.0 预处理样品: 1# 118.2 2# 122.2	符合	
●呼气阻力(Pa)	GB 2626-2006 6.6 头模:中号	≤250	未处理样品: 1# 90.7 2# 93.0 预处理样品: 1# 90.3 2# 91.1	符合	
备注	(本栏空白)				



——本报告结束——

总部:广州市番禺区江湾1号
花都实验室:广州市花都区狮岭镇宝峰南路1号

电话:020-61994558/61994599
电话:020-37721151



扫描全能王 创建

4. 口罩认证资质

International Certification Registrar



Certificate

No. ICR Polska/M8509120



Name and address of certificate owner:

Guangzhou Guanhua labor insurance products Co., Ltd.
2-3/F, Hongtai Industrial Zone (plant A4), butterfly ridge, Xintang Town, Zengcheng District, Guangzhou

Name and address of manufacturer:

Guangzhou Guanhua labor insurance products Co., Ltd.
2-3/F, Hongtai Industrial Zone (plant A4), butterfly ridge, Xintang Town, Zengcheng District, Guangzhou

Product name:

Disposable Folding Mask

Product types:

B061

This certificate confirms that the product meets the requirements of the following standards and within limits of its standards gives presumption of conformity with essential requirements of Regulation 2016/425

EN 149:2001 + A1:2009

The certification process has been carried out in accordance with the program PC-P-07-07.

Evaluation has been carried out in accordance with test reports made by EUROPEAN QUALITY TEST CO., LTD.

No. of test reports:

HX200309478

Certificate issue date:

18.03.2020

Expiration date:

17.03.2025

The mutual obligations and rights of the certification are regulated by the contract No. ICR Polska/2020-8591.

This certificate applies to products having the same attributes (parameters), intended use, that have been evaluated and meet the requirements of the aforementioned standards.




Director: Rafal Kalinowski

Warsaw, 18.03.2020

ICR Polska Co. Ltd.

ul. Plac Przemysłu 6, 03-944 Warszawa
www.icrpolska.com, e-mail: icrpolska@icrqa.com



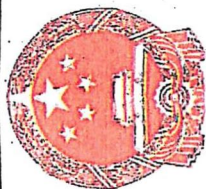

全国工业产品生产许可证

广州市冠桦劳保用品有限公司

经审查，你单位生产的下列产品符合取得生产许可证
条件，特发此证。

产品名称：特种劳动防护用品（明细见副本）

住 所：广州市增城区新塘镇螺岭宏泰工业区（厂房A4）2-3楼

生 产 地 址：

广东省广州市增城区新塘镇螺岭宏泰工业区（厂房A4）2-3楼

证书编号：

（粤）XK02-001-00079

有效期至：

2024 年 07 月 18 日


2019 年

日

有效期届满6个月前，企业应当提出换证申请。



6. 外箱尺寸

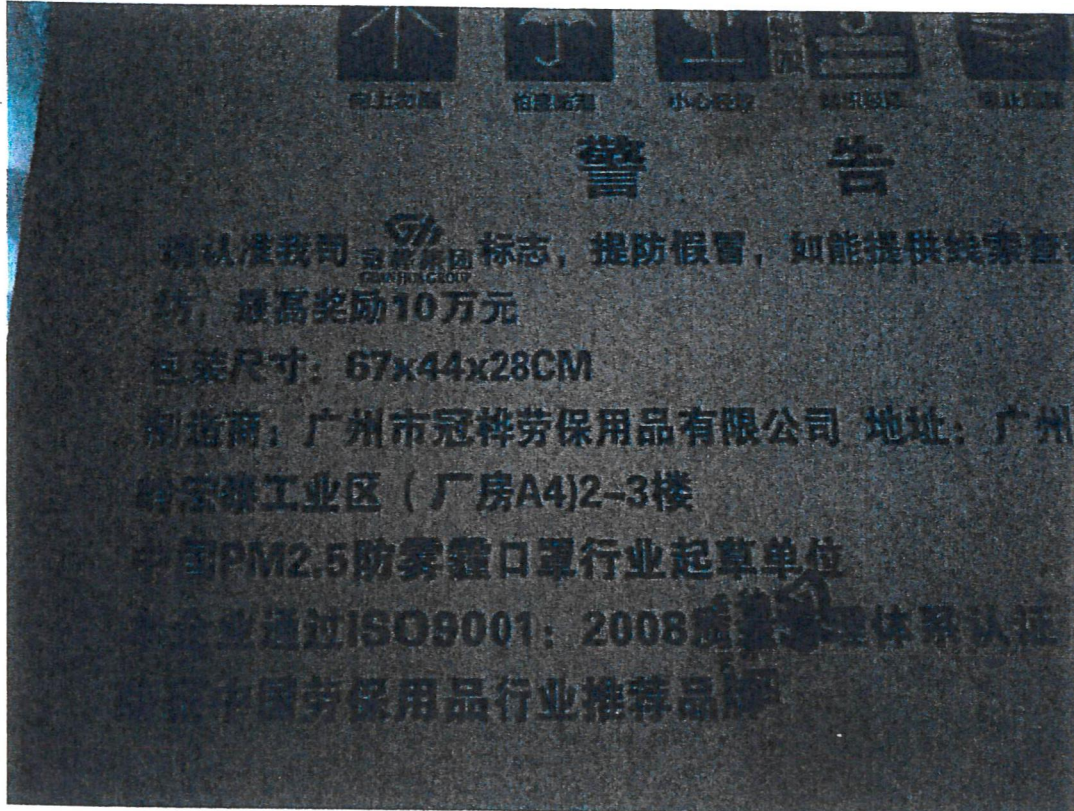

7. 出货总箱数

产品型号: 9801-白色


料件品名: 折叠随弃式口罩

包装规格: 10只/袋

包装数量: 1000个/箱

服务热线: 020-82688166

存货编号:

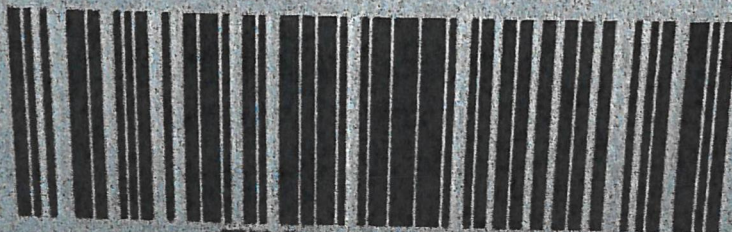

ZDSQS980101

冠桦

GB2626-2006

级别：KN95

冠桦

GB2626-2006

级别：KN95

GB
级别

GB262
级别：1

GB262
级别：1

合格证

产品名称 防尘口罩（抛弃式半面罩）
生产日期 2020年01月
质检员 检验1

KN95
10 PCS

本企业通过ISO9001:2008质量管理体系认证



冠桦
Guanhua

防尘吸 · 更洁净


折叠式颗粒物防护口罩

folding particulate special protective masks

人体工程学设计，更加贴脸保护
采用进口净卡™滤芯，更高效阻尘
3D立体透气空间，呼吸舒适



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

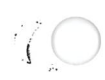

合格证

本厂生产的颗粒物防护口罩，符合GB2626-2006标准的要求，经国家质量监督检验检疫总局认证合格，准予使用。由于纱布口罩对颗粒物的过滤效率非常低，不能有效阻挡颗粒物，同时由于设计落后，纱布口罩无法保证与脸部密合，颗粒物能轻易通过，不安全。请使用者使用符合GB2626-2006标准的颗粒物防护口罩。

戴步骤：



条件和有效期

- 一 在保证储存温度在 -20°C 至 $+30^{\circ}\text{C}$ 范围内，相对湿度不高于80%的条件下，有效使用。
- 二 生产日期见合格证)



告

此口罩只用于对某些颗粒物的防护。使用者必须经过培训，遵守正确使用方法。当地政府法规使用本产品。不正确的使用会导致疾病甚至死亡。正确的使用请咨询您的主管并参见制造商提供信息及使用说明书。


广州市冠特劳保用品有限公司

地址：广州市增城区新塘镇

服务热线：020-82688111

售后热线：020-82678240

七路（113厂房A1栋）

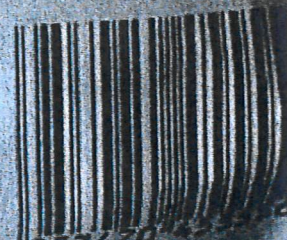

6 953470 423312



8851

KN95

10 PCS

本公司通过ISO9001:2008质量管理体系认证



冠桦
Guanhua

DEAD吸 · 防尘

折叠式颗粒物防护口罩

Folding particulate special protective masks

人体工学设计，更加贴脸保护
进口净卡™滤芯，更高效阻尘
3D立体透气空间，呼吸舒适



LA-2011-1146

冠桦
Guanhua

4.1开始拆这个包装的



